



Mund-Nasen-Schutz Typ II R

Klassifizierung

- Klasse I der Verordnung EU 2017/745 über Medizinprodukte; Typ II R (flüssigkeitsresistent), geprüft nach EN 14683:2019 für chirurgische Masken

Produktbeschreibung

- Latexfreie, hochwertige, anatomisch geformte Gesichtsmaske mit leicht modellierbarem Nasenbügel.
- Innen- und Außenseite besteht aus physiologisch unbedenklichem weichmacherfreiem Polypropylenvlies, das Filtermedium besteht aus speziellem, im Meltblown-Verfahren hergestelltem Mikrofaservlies, zusammengeschweißt im Ultraschallverfahren.

Material


- Außenseite: Blau flüssigkeitsabweisendes Polypropylenvlies
- Innenseite: Weiß hautfreundliches, allergiefreies Polypropylenvlies
- Filtermedium: Mikrofaser aus Polypropylen, im Meltblown-Verfahren hergestellt
- Bänder: hautfreundliches Gummibänder
- Nasenbügel: PE ummantelter Draht

Dermatologische Verträglichkeit

- Getestet nach ISO 10993-5 und 10993-10 für Biokompatibilität keine Reaktivität, keine Intoleranzreaktion, perfekte Verträglichkeit.

Anwendung

- Alle verwendeten Materialien sind frei von Reizstoffen, geruchlos und eignen sich für medizinische Zwecke.
- Die Maske eignet sich für den dauerhaften Einsatz und bietet einen hervorragenden Schutz sowohl für das medizinische Fachpersonal als auch für die Patienten.

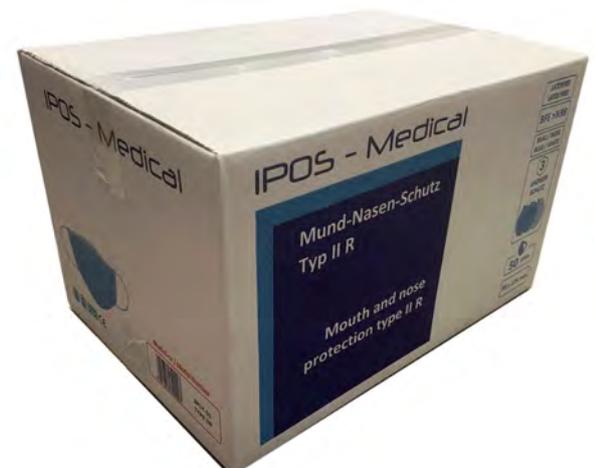

Verpackung

- Deutsch / Englisch Beschreibung
- Spenderbox 50er: GTIN/EAN: 4251806399997
- Karton : 40 x 50er Box = 2.000 Masken
- Palette: 24 Karton = 48.000 Masken

Lagerung

- Ohne direkte Sonneneinstrahlung, in Originalverpackung trocken lagern, siehe auch Verpackung.
- Unter Einhaltung der Lagerbedingungen hat das Produkt eine Lagerdauer von 3 Jahren ab Produktionsdatum

Entsorgung

- Das Produkt kann thermisch verwertet oder auf Deponien entsorgt werden ohne giftige Stoffe freizusetzen.
- Bei kontaminierten Produkten bestimmt die Art und das Ausmaß der Kontamination die Entsorgung, dabei sind die geltenden Gesetze und Bestimmungen zu beachten.

Hinweise

- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch.
- Überprüfen Sie das Verfallsdatum vor der Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände vor dem Gebrauch sauber sind.
- Überprüfen Sie die Eignung Ihrer Maske für die Verwendungsumgebung, indem Sie die BEREICHSSCHILDER prüfen.
- Verwenden Sie keine beschädigte Maske.
- Verwenden Sie keine Maske, wenn Sie Schnurrbart oder Bart tragen, da dieser ein Hindernis darstellt und dadurch nicht sichergestellt werden kann, dass die Maske Ihr Gesicht lückenlos berührt.
- Die Maske minimiert das Risiko eines potenziellen Kontakts mit Mikroorganismen, Körperflüssigkeiten, Blut und Partikeln, sie beseitigt das Infektionsrisiko jedoch nicht vollständig.
- Wechseln Sie Ihre Maske sofort, wenn sie mit Blut, Partikeln oder Körperflüssigkeiten in Kontakt geraten ist.
- Ihre Maske ist für den EINMALIGEN Gebrauch bestimmt und NICHT zur Wiederverwendung geeignet.
- Nach Gebrauch in einen medizinischen Mülleimer entsorgen.
- Die Verwendung einer Maske erhöht den Schutz gemäß den Empfehlungen zum Tragen von persönlichen Schutzartikeln.

LATEXFREI
LATEX FREE

BFE >%98

BLAU / WEIß
BLUE / WHITE

3

-LAGIGER
SCHUTZ



50 STÜCK

95 x 175 mm

NON
STERILE

